


Pozorujeme a skúmame

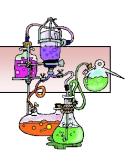

Téma: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ DEJE

Úloha: Skúmanie vlastností modrej skalice pri zmene podmienok

Pomôcky a chemikálie: roztieračka s roztieradlom, laboratórna lyžička, porcelánový téglik, trojnožka, triangel, kahan, Petriho miska, striekačka s vodou, modrá skalica (pentahydrát síranu meďnatého), zápalky.

Postup práce:

- 1) Lyžičku modrej skalice rozotrieme v roztieračke na prášok (A C).
- 2) Prášok nasypeme do porcelánového téglika, ktorý postavíme do triangla a zohrievame plameňom kahana dovtedy, kým nedôjde k zmene jeho sfarbenia na bielu (D E).
- 3) Po vyschnutí nasypeme vzniknutú bielu látku do Petriho misky a pokvapkáme ho vodou (F).
- 4) Do tabuľky doplníme údaje.

Pozorovanie:



Rozdrvením kryštálov modrej skalice vznikla svetlomodrá prášková látka. Zahrievaním tejto svetlomodrej látky vznikla bezvodá biela látka – síran meďnatý. Po nakvapkaní vody na bielu látku vznikla modrá látka.

Tabuľka:

	skupenstvo	sfarbenie	vzhľad
Pred rozdrvením			
Po rozdrvení			
Po zahrievaní			
Po pokvapkaní vodou			

Záver:

Doplň do záveru fyzikálny alebo chemický dej.

Rozotretím	modrej	skalice	(vzorec:	5H ₂ O.CuSO ₄),	v roztieračke	došlo	
k rozbitiu jej kryštálov. Tento dej nazývame drvenie. Nová látka nevznikla.							
<u>Drvenie</u> je							
Počas zahrievania došlo k uvoľneniu častíc vody z modrej skalice a k zmene							
sfarbenia. Vznikla nová látka bezvodý síran meďnatý (vzorec: CuSO4).							
<u>Zahrievanie</u>	je		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•••••	
Nakvapkaním na bielu látku došlo k opätovnému naviazaniu vody. Vznikla							
nová látka – modrá skalica. Je to							

Ako sa ti darilo?







